

過濾瓶組配件



PES / PC 真空瓶

規格	1200 ml, PES 真空瓶	1200 ml, PC 真空瓶
料號	197000-11	197000-11-PC
液位刻度間距	100 ml	100 ml
浮球防溢保護裝置	Yes	Yes
廢液抽取轉接蓋	Yes	Yes
適用軟管內徑	ID8	ID8
蒸氣滅菌	Yes	Yes



PP 真空瓶 / 排水真空瓶 **NEW**

規格	4000 ml, PP 真空瓶	4000 ml, PP 排水真空瓶
料號	197200-47	197200-48
接頭形式	插心接頭	插心接頭
液位刻度間距	500 ml	500 ml
浮球防溢保護裝置	Yes	Yes
適用軟管內徑	ID4 ~ ID8	ID4 ~ ID8
排水裝置	-	Yes
蒸氣滅菌	Yes	Yes



多層過濾轉接器 **NEW**

規格	多層過濾轉接器
料號	167230-05
本體材質	硼矽玻璃
濾膜墊片材質	不鏽鋼濾網
濾膜直徑	47 mm
適用漏斗	300 ml 玻璃過濾漏斗 (選配)



連續過濾套件組 **NEW**

規格	連續過濾套件組
料號	167210-36
本體材質	PTFE
抽液接頭	PTFE
適用漏斗	300 ml 玻璃過濾漏斗 (選配)
適用軟管內徑	ID6



影片介紹

* PES : Polyethersulfone, PC : Polycarbonate, PP : Polypropylene

過濾瓶組配件



濾膜 (Membrane Filters)

規格	玻璃纖維濾紙	MCE 濾膜
料號	167100-20	167100-52
廠牌	Pall	Pall
濾膜直徑	47 mm	47 mm
濾膜孔徑	1 μm	0.45 μm
濾膜材質	Glass fiber	MCE
包裝	100/PK	200/PK



GL45 抽氣轉接座 / 過濾轉接座

規格	GL45 抽氣轉接座	GL45 過濾轉接座
料號	197000-60	197000-65
瓶蓋材質	PP	PP
墊片材質	-	PTFE
適用矽膠塞	-	8 號矽膠塞
適用軟管內徑	ID6	ID4 ~ ID8
蒸氣滅菌	Yes	Yes

GL45 抽氣轉接座：應用

廢液瓶

搭配幫浦及其他配件可用於接收水質檢驗過濾完的液體、或是細胞培養液的廢液收集。




乾燥瓶

血清瓶內置入乾燥劑，可吸收過濾或乾燥實驗時所產生的水氣、保護真空幫浦。



吸附瓶

瓶身內添加適當的中和或是緩衝液，可中和或吸附實驗時所產生的酸、鹼及有機溶劑氣體，以保護實驗室環境或幫浦。

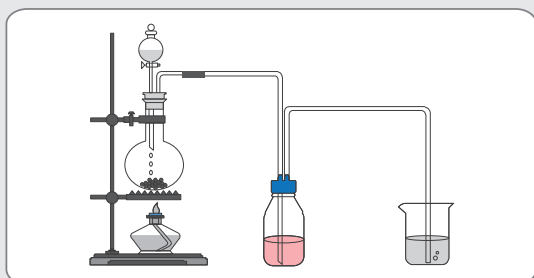

緩衝瓶

連接於真空幫浦及過濾裝置中間、防止過濾完的液體被吸入真空幫浦內。



* 參考 P.66 選購更多 GL45 玻璃血清瓶